

TESTE RÁPIDO COVID-19



Labtest 


A vida merece o melhor diagnóstico.

TESTE RÁPIDO COVID-19

Teste sorológico para detecção de anticorpos específicos contra o novo coronavírus SARS-CoV-2, causador da doença COVID-19.


- Metodologia: Imunocromatografia;
- Detecção de anticorpos específicos IgG e IgM;
- Amostra: soro, plasma e sangue total;
- Procedimento simples, rápido e de fácil interpretação (resultado em 10 minutos);
- Sensibilidade de 85,0% para IgM e >99,9% para IgG;
- Especificidade 96,0% para IgM e 98,0% para IgG;
- Comparativo realizado com amostras positivas e negativas previamente determinadas pela técnica de PCR.

Procedimento e interpretação do teste:

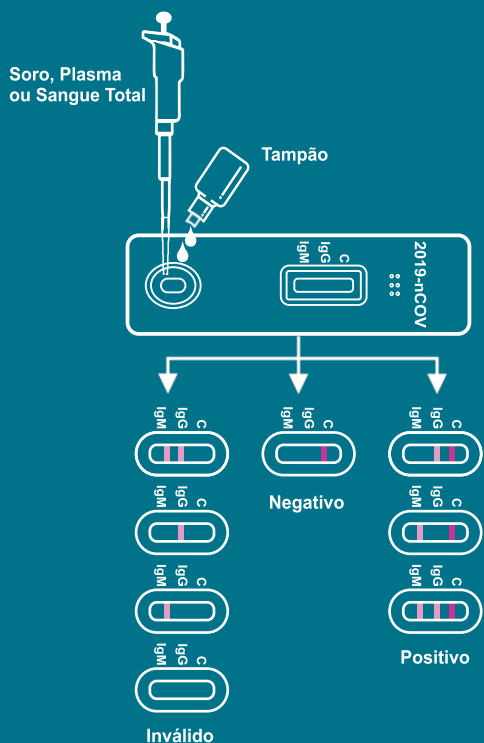

O teste emprega o princípio de Imunocromatografia. O resultado é considerado positivo na presença das linhas IgM e/ou IgG, e negativo na ausência destas, sendo válido apenas na presença da linha controle.

A resposta imunológica após a infecção pelo SARS-CoV-2:

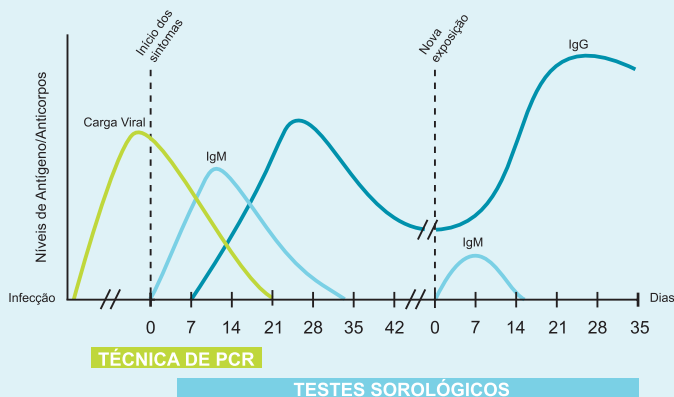

Solução Labtest: **Anti COVID-19 IgG/IgM Rapid Test**

- Ref. 732-5 - Placas de reação: 5 unidades - Reagente 2: 1 x 3,0 mL
- Ref. 732-10 - Placas de reação: 10 unidades - Reagente 2: 1 x 3,0 mL
- Ref. 732-20 - Placas de reação: 20 unidades - Reagente 2: 1 x 3,0 mL
- Ref. 732-40 - Placas de reação: 40 unidades - Reagente 2: 2 x 3,0 mL
- Ref. 732-100 - Placas de reação: 100 unidades - Reagente 2: 4 x 3,0 mL



Labtest

0800 031 3411
sac@labtest.com.br
labtest.com.br

Certificações
Labtest:

