




Aud-H3

Analizador hematológico con recuento diferencial de 3 partes, medición de 19 parámetros y 3 histogramas. Capacidad de hasta 40 muestras por hora.

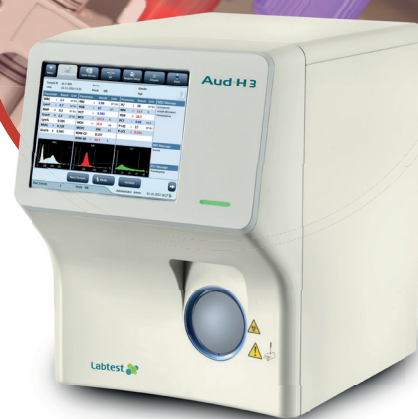

Robustez y sencillez. Sólo se necesitan dos reactivos en la rutina, diluyente y lisis, para determinar los parámetros. Señalización de diferenciación o morfología anormal de células sanguíneas. Lavado automático de la sonda de muestra después de cada análisis, usando diluyente. Sistema operativo intuitivo, con touch screen, facilitando la ubicación y activación de funciones.



Bajo consumo de muestra con resultados confiables. El excelente sistema de pipeteo permite la aspiración de volúmenes reducidos en un tubo abierto utilizando 20 μ L en el módulo prediluido y 9 μ L en el módulo de sangre total. Posee una alta capacidad de almacenamiento de datos, llegando hasta los 200.000 resultados con histograma.

Diseño versátil y fácil de usar. Pantalla de 8,4 pulgadas. Tiene un diseño inteligente que ahorra espacio, pesa solo 20 kg y reactivos acoplados al analizador. Capacidad para comunicar datos a través de Wi-Fi (optativo) junto con LIS bidireccional, puerto USB, puerto LAN y lector de código de barras (optativo).



Aud-H3

Especificaciones del Modelo

Mayo/2023

Velocidad nominal	<ul style="list-style-type: none"> • 40 muestras/hora
Número de parámetros	<ul style="list-style-type: none"> • 19 (WBC, LYM%, LYM#, MID%, MID#, GRA%, GRA#, RBC, HGB, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, HCT, PLT, MPV, PDW, PCT) • 3 histogramas para WBC, RBC y PLT
Reactivos	Funciona con 2 reactivos (Diluyente y lisante)
Muestras	<ul style="list-style-type: none"> • Módulo prediluido 20 µL • Módulo de sangre total 9 µL • Lector de código de barras optativo
Metodologías	<ul style="list-style-type: none"> • Impedancia • Fotometría (hemoglobina) libre de cianuro
Sistema de pipeteo	Pipeteo de tubo abierto
Almacenamiento de datos	Hasta 200.000 resultados incluyendo información numérica y gráfica
Sistema de interfaz	<ul style="list-style-type: none"> • 4 puertos USB (Impresora externa, actualización de software, lector de código de barras, adaptador de WIFI, teclado y mouse) • 1 puerto LAN
Control de calidad	Permite registrar muestras de control y ver datos estadísticos y gráficos
Pantalla	Pantalla táctil TFT de 8,4 pulgadas
Dimensiones (AxAxP)	40 x 30 x 41 cm
Peso	20 kg

Lea el Código QR y acceda a la **versión digital**.
Converse con nuestro equipo de ventas.

