



Aud-H 5AL


Analizador hematológico con diferencial de 5 partes, automático y cuantitativo, que presenta 27 parámetros.



Excelencia en precisión y muestreo automatizado. Medición de glóbulos blancos, proporcionando información sobre el tamaño y la complejidad de las células. Posee un cargador automático de muestras de hasta 30 tubos para abastecimiento continuo.

Alta productividad y dinamismo. Bajo consumo de reactivos, velocidad de hasta 60 muestras por hora con posibilidad de insertar una muestra de emergencia con carga automática.

Fácil mantenimiento con software completo e intuitivo. Definición de mantenimiento programado automático por software. Posibilidad de generar informes personalizados. Monitoreo de controles a través de diagrama de Levey-Jennings, lo que permite un mejor seguimiento y gestión del control de calidad interno.

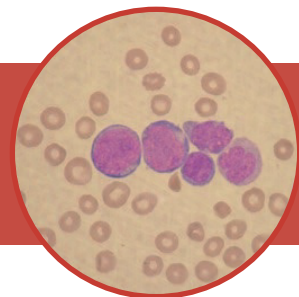

Aud-H 5AL

Especificaciones del Modelo

Mayo 2023

Velocidad nominal	<ul style="list-style-type: none"> • 50 muestras/hora - módulo tubo cerrado • 60 muestras/hora - modo Autoloader
Número de parámetros	<ul style="list-style-type: none"> • 27 (WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Eos%, Bas%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, LIC%, LIC#, ALY%, ALY#) • 3 histogramas y 1 scatter
Reactivos	Funciona con 4 reactivos (1 Diluyente y 3 lisis)
Muestras	<ul style="list-style-type: none"> • Módulo prediluido 20 µL • Módulo de sangre total 20 µL
Metodologías	<ul style="list-style-type: none"> • Impedancia • Fotometría libre de cianuro (hemoglobina) • Citometría de flujo láser de colorante químico • Canal independiente para el recuento de basófilos
Sistema de pipeteo	<ul style="list-style-type: none"> • Pipeteo de tubo cerrado • Autoloader
Almacenamiento de datos	Hasta 40.000 resultados, incluyendo información numérica y gráfica
Sistema de interfaz	Puerto LAN: soporta el protocolo HL7
Control de calidad	Permite registrar muestras de control y ver datos estadísticos y gráficos
Dimensiones (AxAxP)	52,5 x 59 x 57 cm
Peso	58 kg

Lea el Código QR y acceda a la **versión digital**.
Converse con nuestro equipo de ventas.

